


Fairywill

スマート口腔洗浄器(F5020A)取扱説明書

このたびは、Fairywill製口腔洗浄器をお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり安全にお使いください。
またこの取扱説明書は、必要な場合にご覧いただけるよう、お読みにな
った後も大切に保管して下さい。

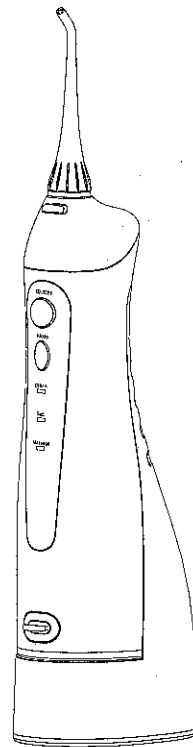

1. 安全上の重要注意事項:

このセクションでは、製品を正しく安全にお使いいただく方法について説明しています。人への危害、財産の損害を防止するために、以下の注意事項を必ずお守りください。

- 乳幼児など、自分で製品を操作できない方がお一人で使用する事は避けてください。子供の手の届く場所に置かないでください。
- 製品の改造、分解、修理は絶対にしないでください。
- 製品を落下する可能性のある場所やバスタブやシンク内に置かないでください。
- 製品が水に浸かってしまった場合触らないでください。その場合には直ちに電源を抜いてください。
- 浴室で使用しないでください。


2. 注意事項:

- 8歳以上のお子様、肉体的あるいは知覚認知的能力不足の方、経験や知識不足の方が本製品を使用する場合は、責任者による製品の安全な使用方法や危険性についての監督指導のもとで使用してください。
- お子様を製品で遊ばせないでください。お子様が製品をお手入れ掃除の場合には、監督者のもとで行ってください。
- この製品に付属の電源装置以外の電源は使用しないでください。
- 製品を廃棄する場合には、本体からバッテリーを外してください。
- バッテリーを外す場合には、必ず電源プラグをコンセントから外してください。
- バッテリーは安全に正しく廃棄してください。
- バッテリーを外す場合、7ページに記載している「廃棄」の項目をご覧ください。
- 40℃以上の温水をタンクに入れしないでください。
- 延長ケーブルや変圧器のコードが傷んだ場合、そのまま使用されると危険です。速やかに製造メーカー、修理サービス店、専門家へ交換を依頼してください。
- 熱くなる場所にコードを置かないでください。
- ノズルが緩んでいる場合には使用しないでください。
- 本体を水の中に入れしないでください。
- 口腔洗浄以外の目的で使用しないでください。
- ノズルをお子様の手の届かない場所に置いてください。
お子様が誤ってノズルを飲み込んだ場合、喉を詰まらせるなどの可能性があり大変危険です。
- 洗口剤は腐食性があり、洗浄器の寿命に影響を与える可能性があるため、使用しないことをお勧めします。

- 歯や歯茎に痛みを感じる方は本製品を使用しないでください。使用する前に歯科医に相談してください。

- 歯茎を傷つける恐れがありますので、ノズルを歯や歯茎に強く押し付けしないでください。

3. 外観:

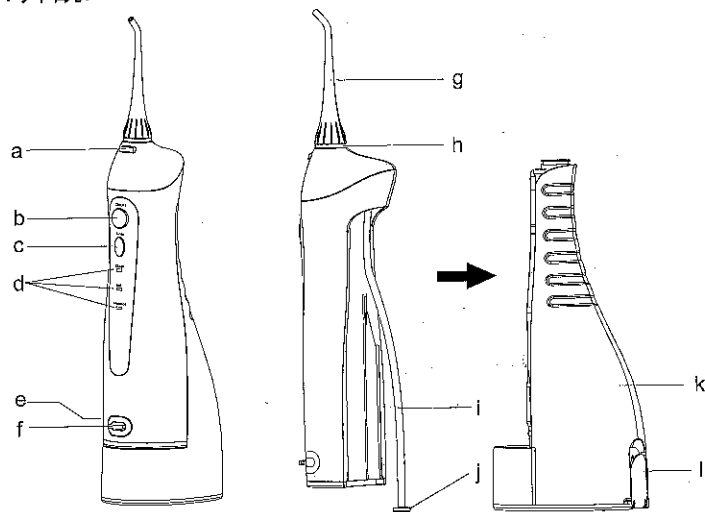

- a. ノズル取り外しボタン
- b. オン/オフボタン
- c. モードボタン
- d. モード表示
- e. 充電ベース
- f. 充電ベースカバー

- g. ノズル
- h. 識別リング
- i. ノズル吸引チューブ
- j. フィルター
- k. ウォータータンク (300ML)
- l. ウォータータンクキャップ

ご注意:

ご使用開始前、製品中(タンク、吸引チューブなど)に多少の液体が付着している場合があります。この水は製品性能(水流など)試験で使用した蒸留水が残ったものであり、健康への影響はありません。

4. 使い方:

4.1 本体への充電 (図1参照)

- 水漏れを防ぐため、水フロスを使用開始する前にタンクのキャップをしっかりと締めてください。
- 充電ベースカバーを外し、充電ケーブルのプラグを本体のソケットへ確実に差し込んでください (本体のプラグに差し込む前に、ケーブルのプラグ部分に液体がついていないことを確認してください。)
- 充電ケーブルのアダプターをしっかりと電源コンセントに差し込んでください
- 充電中は「CH」インジケータが点滅し、充電が終わると消灯します。
- 充電が完了しましたら、プラグを外し、充電ベースにカバーをしてください。

ご注意:

洗浄中あるいは後に「CHランプが点灯した場合、充電が必要であることをお知らせしています。完全に充電するためには約4時間かかります。

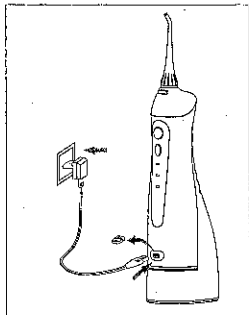


図1

4.2 口腔洗浄

- ノズルを本体に取り付けてください。(図2)
- ウォータータンクのキャップを開け、40℃以下の水をタンクに入れて、キャップを開めてください。(図3)
- または、ウォータータンクを本体からスライドして外し、40℃以下の水をタンクの上口から入れてください。そのあとタンクをユニットに戻してください。(図4)
- 「モード」ボタンを押し、お好みのモードを選択してください。
- 洗浄中でも動作モードを変更できます。(図5)
クリーニング: 通常のクリーニングでは、約90秒間持続します (+/- 15秒間)。
ソフト: 敏感な歯茎を約110秒間 (+/- 15秒間) 穏やかに清掃します。
マッサージ: 歯茎の清掃とマッサージを100秒程度 (+/- 15秒) 行います。
- ノズルの先端を歯に向けるように本体をまっすぐにして持ちます。
- 水が流れ出るよう口を軽く開けて使用してください。

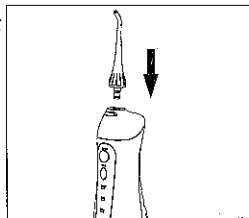


図2

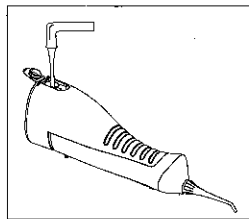


図3

- 「オン/オフ」ボタンを押し、洗浄を開始してください。(図6)
- 1) ウォータージェットが歯や歯茎に対し90度の角度になるよう当ててください。
- 2) ウォータージェットを歯に沿ってゆっくりと動かしてください。
- 3) 歯茎に対してノズルの先が90度の角度になるようにあてながら、歯茎に沿ってウォータージェットを動かしてください。
- 4) 歯、矯正器、歯冠、ブリッジの間や周りを洗浄してください。
- ノズルの交換が必要な場合は、「オン/オフ」ボタンを押しして終了し、ボタンを押ししてノズルを取り外してください。(図7)
- 洗浄が完了したら、「オン/オフ」ボタンを押しして終了してください。

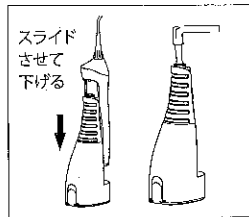


図4

4.3 使い終わったら (図8)

- ウォータータンクのキャップを開け、タンク内の水を捨ててください。
- 「オン/オフ」ボタンを押しして電源を入れ、本体内の水を出してください。
- 再度「オン/オフ」ボタンを押し、本体の電源を切り、ウォータータンクのキャップを開けてください
- 乾いた布で本体を拭き取ってください

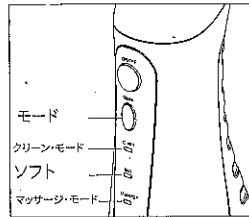


図5

ご注意:

雑菌の繁殖を防ぐため、本体内に水が残らないようにしてください。長期間ご使用にならない場合には、しまう前に製品を布で拭きよく乾かしてください。



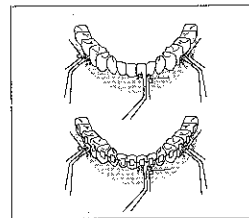


図6

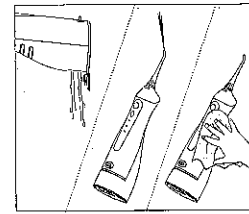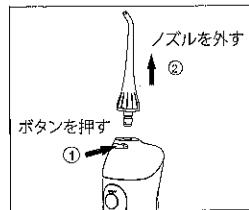

5. お手入れ:

製品を洗う時は水あるいは中性洗剤のみお使いください。製品の故障の原因になりますので、苛性洗剤または研磨剤は使わないでください(酢、石灰除去剤など)。洗う時に50℃以上のお湯を使わないでください。高温になる場所や直射日光が当たる場所に置かないでください。

5.1 本体

- 石鹸水で軽く濡らした布で汚れを取り、そのあと乾いた布で拭き取ってください。
- 本体を洗う際、水の中に本体を入れしないでください。
- 水で洗ったあとはよく本体を乾かしてください。

5.2 ウォータータンクキャップ

布で埃や汚れを拭き取ってください

5.3 ノズル

- 水洗いをし、柔らかか布で拭き取ってください。
- 6ヶ月毎に新しいノズルに交換してください。

5.4 吸水チューブ

- 水洗いをし、柔らかか布で拭き取ってください。
- チューブを折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

5.5 タンク

- 水洗いをし、柔らかか布で拭き取ってください。
- 長期間使用しない場合は、タンクをよく乾かしてください。


6. 故障かなと思ったら:

症状	考えられる原因	対処方法
動作しない	購入したばかりの商品 あるいは3ヶ月以上使用 していない。	製品を最低4時間充電 してください。
充電しても数分しか 動作しない	充電池の寿命	カスタマーサービスまでお 問い合わせください。
	充電が十分されていない	製品を最低4時間充電 してください。
水圧が低い	ノズルに汚れがたまっている	ノズルを交換してく ださい
	ノズルが変形している	
	フィルターに汚れがたま っている	フィルターを掃除してく ださい
水が出てこない	タンクが空	タンクに水を入れてください
	使用中本体を傾けすぎている	本体を垂直に持って使用 してください

7. 廃棄:

この製品の充電式バッテリーは、簡単に取り外しができ、リサイクル可能です。製品寿命により廃棄する場合、以下の方法に従い充電式バッテリーを外してください。行う際には、目、手、指と作業する場所を保護してください。

- 本体の持ち手の底にあるゴム足2本を外してください。(図9の①参照)
- 本体の持ち手の底の穴にドライバーをさし逆時計回りに回して底のキャップを外してください(図9の②参照)
- ウォータータンクを本体からスライドして外し、吸水チューブの隣にある2つのネジを外してください。(図10)
- 外側のカバーを外し、内部の部品を本体から出してください。そして、内部のすべてのネジを外してください。(図11)
- バッテリーケーブルを切り、本体内部からバッテリーを取り出してください。(図12)

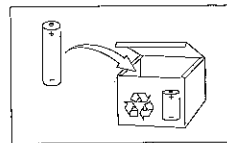

リサイクルに関してご不明な点がありましたら、
お住いの地域の清掃局へお問い合わせください。

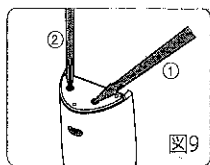


図9

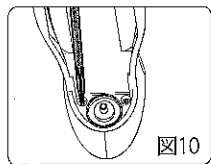


図10

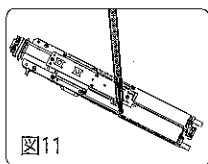


図11

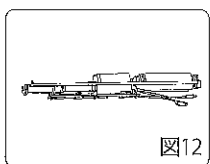


図12

8. 保証:

- この製品の保証は購入日から1年間です。詳しくはFairywillにお問い合わせください。
- 保証期間中、部品や製造が原因による欠陥が発生した場合、部品あるいは製品すべてを状況に応じて交換します。
- 無償修理を依頼する場合、製品ならびにその製品の購入日を証明できるものをFairywillに提出する必要があります。
- 以下は保証対象外となります：
 - 不適切な取り扱いによる損傷。例、電源の誤使用、正しくないソケットへの差し込み、故意的な損傷など
 - 経年劣化、使用に伴うすり減り、剥がれ
 - 本製品目的以外での使用、不適切な使用、Fairywill製以外の構成部品を使用したことが原因の故障
- この保証はお客様の法定権利に影響するものではありません。


9. お問い合わせ:

- ④ Fairywill
- ② www.fairywill.com
- ③ support@fairywill.com

中国製

製造:

Zuhai Zonghengyupin Kuajingdianshang
Youxiangongsi, Zuhai,
Guangdong, 519031, CN

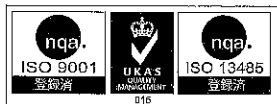

ISO9001 & ISO13485 認証取得 製造メーカー



中国発行

